

M

STUDIO

Software

MedRx[®]

Manuale di installazione del software Studio





0.123

TÜV SÜD Product Services GmbH

Ridlerstraße 65 • 80339 Monaco di Baviera • Germania



www.medrx-diagnostics.com



1200 Starkey Rd., #105, Largo, FL 33771 USA

Numero verde: +1 (888) 392-1234 • +1 (727) 584-9600

Fax: +1 (727) 584-9602 • Email: medrx@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com



Rappresentante autorizzato MedRx in Europa

DGS Diagnostics A/S

Audiometer Alle 1 • 5500 Middelfart • Danimarca

Distributore: MedRx International

DGS Diagnostics Sp. z o.o.

Rosówek 43

72-001 Kołbaskowo, Polonia

Tel.: +48 91 835 63 00

Email: orders@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com



I manuali archiviati di MedRx sono disponibili all'indirizzo www.medrx-diagnostics.com/support/manuals-studio-software/archive

Indice

Requisiti del computer	4
Installazione del software.....	5
Connessione del dispositivo	7
Impostazioni della scheda audio	8
Connessione a un database	10
Reclami/Segnalazioni relative alla sicurezza.....	12
Garanzia limitata	13





Requisiti del computer

Specifiche minime per l'utilizzo di MedRx:

Computer compatibile con PC Windows®
Processore Intel™ i5 2,0 GHz o superiore
4 GB di RAM
20 GB di spazio libero su disco rigido
Una porta USB 2.0
Windows 10 o 11 Professional
Compatibile con USB 3.0

Specifiche dei computer consigliate per l'utilizzo di MedRx:


PC Windows®
Processore Intel™ i5 Quad Core o superiore
Almeno 8 GB di RAM
Porta USB 3.0
Scheda grafica con 2 GB di memoria video dedicata
Almeno 50 GB di spazio libero su disco rigido
Connessione a Internet ad alta velocità
Windows 10 o 11 Professional
Compatibile con USB 3.0

Installazione del software




1. Inserire l'unità flash USB MedRx in una porta USB:

- Avvia **Risorse del computer**
- Individuare l'unità USB

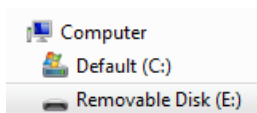

La lettera (E:) può variare in base alla porta USB selezionata.
Consultare la documentazione del computer.

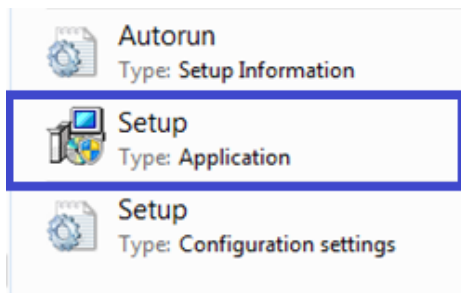


2. Fare doppio clic su **Configurazione** per avviare:

NOTA se richiesto, *accettare l'autorizzazione per l'installazione del software.*




3. Nella schermata di configurazione, selezionare **Installazione di MedRx Studio**.

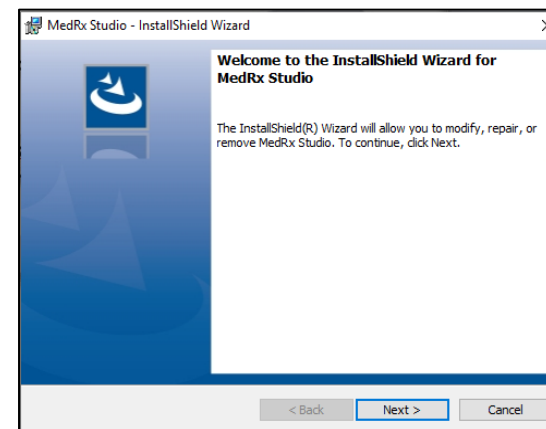


4. Questa è la schermata di Benvenuto.

- Per continuare, fare clic su **Avanti**.

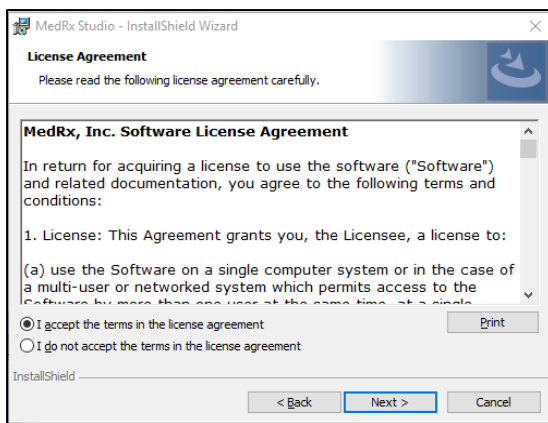


5. Leggere il contratto di licenza del software. Questo importante documento definisce le condizioni d'uso accettabile del software Studio.

- Dopo aver letto il contratto, selezionare **Accetto**.
- Fare clic su **Avanti**.

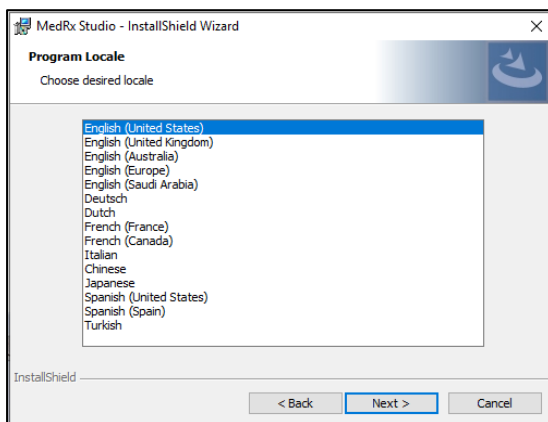

6. Questa schermata consente di impostare la lingua e la posizione.

- Eseguire una selezione e fare clic su **Avanti**.

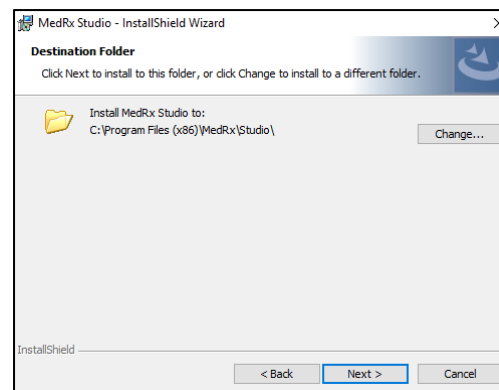


7. Questa schermata indica la posizione dei file del programma.

Per gran parte degli utenti è consigliabile la posizione predefinita.


Se necessario, è possibile modificare questa posizione.

- Per continuare con le impostazioni predefinite, fare clic su **Avanti**.
NOTA per modificare la posizione dei file (solo utenti avanzati o amministratori di sistema) fare clic su Modifica.

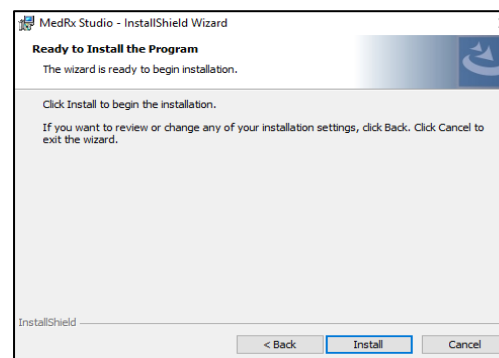


8. Adesso è possibile eseguire l'installazione del programma.

- Per continuare, fare clic su **Installa**.
- Per effettuare modifiche, fare clic su **Indietro**.

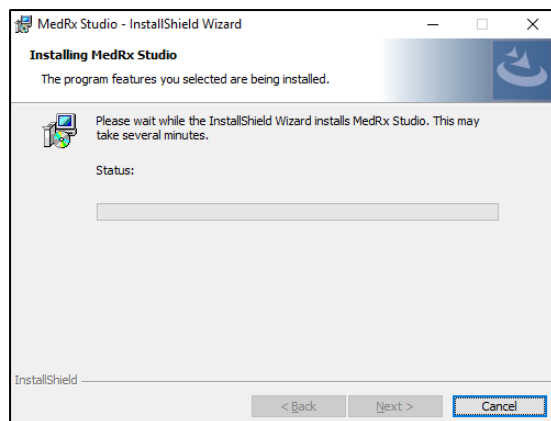

9. L'installazione viene avviata.

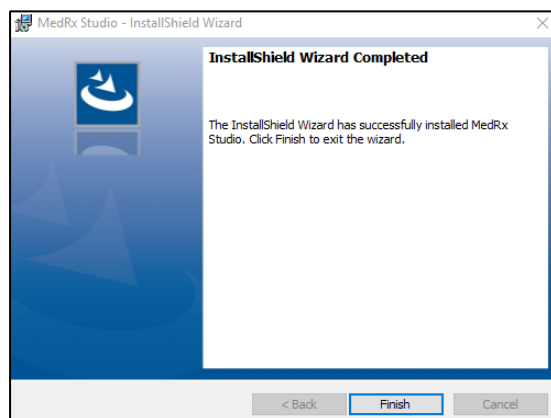


10. Al termine dell'installazione:

- Fare clic su **Fine**.


Connessione del dispositivo

I prodotti MedRx vengono alimentati tramite USB.

Collegare il cavo USB dal dispositivo MedRx al computer.

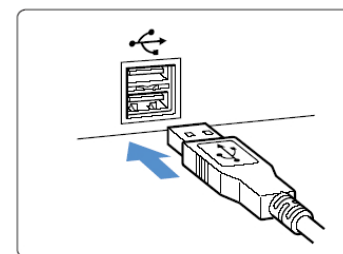

Attendere la copia e l'installazione da parte del sistema dei driver predefiniti di Windows.

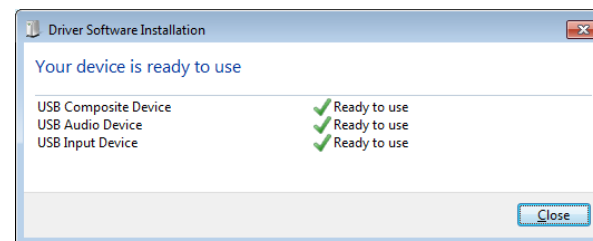

Quando viene visualizzata questa schermata e tutti i dispositivi sono "Pronti per l'uso"


- fare clic su **Chiudi**.

Impostazioni della scheda audio


Confermare o configurare le impostazioni predefinite della scheda audio di Windows. In questo modo, tutti i suoni di Windows non emessi da MedRx verranno indirizzati alla scheda audio interna del computer. (Questi suoni comprendono le notifiche degli eventi, come ad esempio i nuovi messaggi di posta elettronica, gli avvisi degli errori e la riproduzione audiovisiva).



1. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante posta nella barra delle applicazioni.

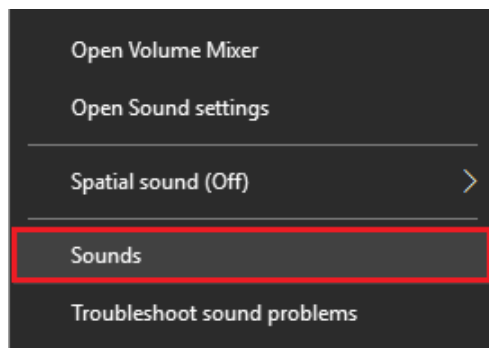


2. Selezionare l'opzione **Suoni** dall'elenco.

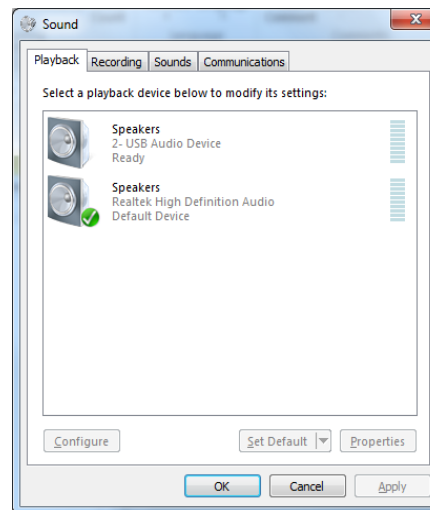

3. Nel pannello di controllo Audio di Windows, sotto le schede Riproduzione e Registrazione, verificare che il dispositivo audio MedRx non sia impostato come predefinito. Se il dispositivo è impostato come predefinito, modificarlo facendo clic sul dispositivo audio del sistema (diverso da MedRx) e selezionare Imposta predefinito.

NOTA probabilmente la scheda audio interna del computer non utilizzerà il nome indicato in questa schermata. Consultare la documentazione del computer per verificare il nome della scheda audio interna e impostare questo controllo di conseguenza.

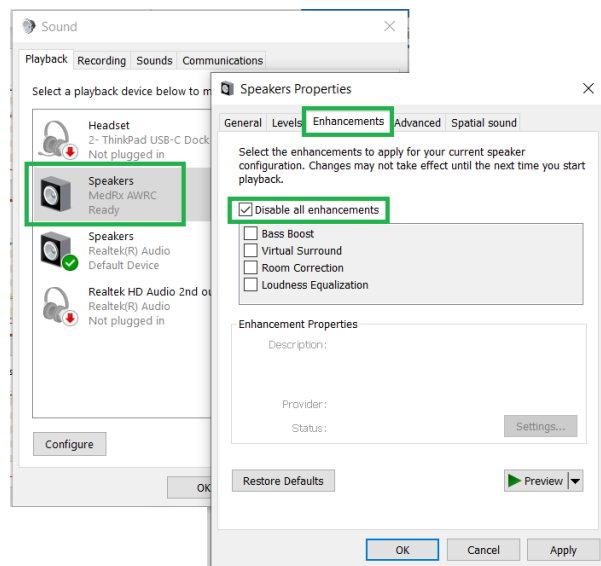

I miglioramenti potrebbero non essere disponibili su tutti i PC. Ciò non vale per i PC privi dei miglioramenti audio.

6. Fare clic su **OK**.

Il nuovo dispositivo MedRx è configurato


4. Nel pannello di controllo audio di Windows, nella scheda **Riproduzione** fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo MedRx e selezionare Proprietà. Accedere alla scheda **Miglioramenti** e selezionare **Disattiva tutti i miglioramenti**. Quindi, fare clic su Applica e infine su OK.

I miglioramenti potrebbero non essere disponibili su tutti i PC. Ciò non vale per i PC privi dei miglioramenti audio.


5. Nel pannello di controllo audio di Windows, nella scheda **Registrazione**, fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo MedRx e selezionare Proprietà. Accedere alla scheda **Miglioramenti** e fare clic su **Disattiva tutti i miglioramenti**. Quindi, fare clic su Applica e infine su OK.

Connessione a un database

È possibile eseguire il software MedRx Studio con NOAH Systems, OtoAccess, MS SQL Express o senza accesso al database.

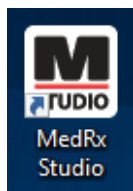


Per configurare un database, fare doppio clic sull'icona MedRx Studio posta sul desktop di Windows.

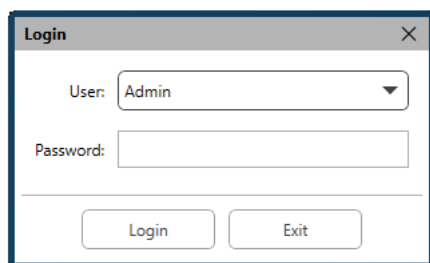

Se viene visualizzata la finestra di accesso, fare clic su Accedi. Durante l'installazione iniziale non viene impostata alcuna password.




Fare clic sulla rotella delle impostazioni posta nella barra dei menu in alto a destra.

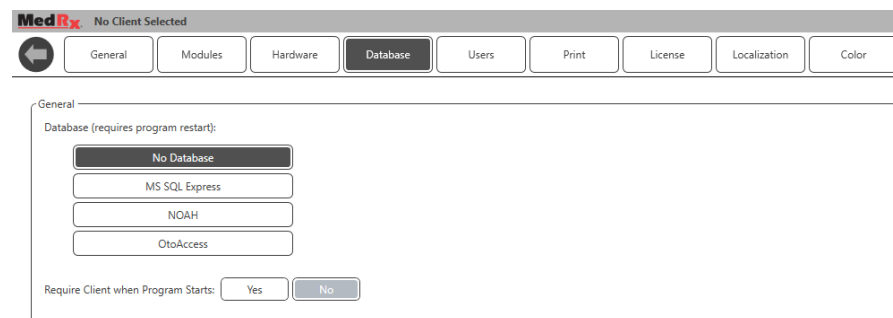

Nelle schede, selezionare Database. Fare clic sul database desiderato. Chiudere il software MedRx Studio per applicare le modifiche.

Nota Verranno visualizzati solo i database configurati.

Configurazione del database

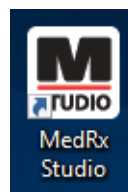


Senza database

- Fare doppio clic sul collegamento a MedRx Studio posto sul desktop di Windows.




Noah

- Scaricare e installare Noah.
- Avviare Noah.
- Selezionare un paziente.
- Avviare il modulo MedRx Studio attenendosi alle procedure NOAH.

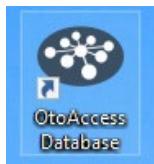

OtoAccess

- Scaricare e installare OtoAccess.
- Avviare OtoAccess.
- Selezionare un paziente.
- Avviare il modulo MedRx Studio attenendosi alle procedure OtoAccess.

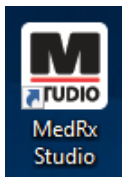


MS SQL Express


- Scaricare e installare MS SQL Express.

- Eseguire la configurazione del database MS SQL MedRx.
- Fare doppio clic sul collegamento MedRx Studio posto sul desktop di Windows.

Nota MedRx fornisce accesso alle connessioni del database SQL. Il proprietario del database deve configurare il database e le politiche di backup per soddisfare i requisiti normativi locali.

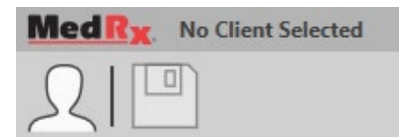

- **Selezionare il client** nell'angolo in alto a sinistra.

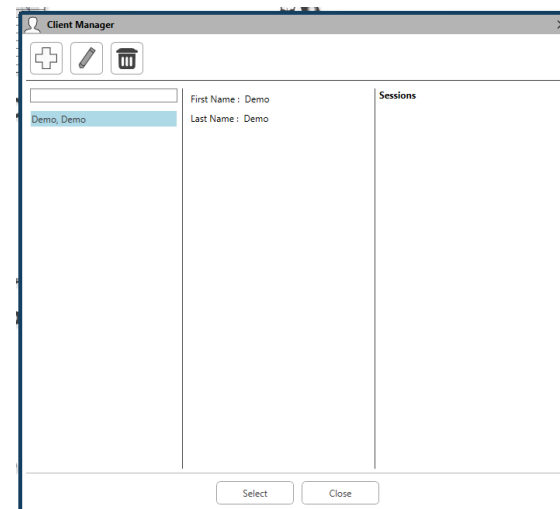

- **+**: creare il client.
- **Matita**: modificare il client.
- **Cestino**: eliminare il client.

Reclami/Segnalazioni relative alla sicurezza

Contattare il distributore locale in caso di incidenti correlati a difetti del prodotto (difetti hardware o bug software) o eventi avversi (che non hanno necessariamente un nesso causale con il prodotto). Si raccomanda all'utente di segnalare tutti i fatti noti sull'incidente. In caso di qualsiasi incidente grave con gravi ripercussioni sulla salute del paziente o dell'utente (eventi avversi gravi), il distributore locale dovrà segnalarlo a MedRx tramite il suo sistema di vigilanza appropriato. MedRx deve garantire che l'autorità di regolamentazione del paese di residenza del paziente sia informata in base ai requisiti di vigilanza. MedRx gestirà tutti i reclami sui prodotti e gli eventi avversi secondo la procedura interna.

Garanzia limitata

MedRx garantisce che il prodotto è esente da difetti legati ai materiali e alla lavorazione per due anni dal momento dell'acquisto. Se un sistema non funziona correttamente durante questo periodo, contattare MedRx al numero +48 91 835 63 00. Un rappresentante aziendale consiglierà al proprietario di restituire componenti specifici o l'intero sistema a:

MedRx International
DGS Diagnostics Sp. z o.o.
Rosówek 43
72-001 Kołbaskowo
Polonia

MedRx International riparerà o sostituirà eventuali dispositivi difettosi, testerà completamente il sistema e/o i componenti e spedisce il sistema tempestivamente al proprietario. Non verranno richiesti costi per la riparazione o spedizione di ritorno, a patto che il sistema sia stato acquistato meno di due anni prima e non venga utilizzato in modo improprio, erraneo o abbia subito danni. Tali danni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, caduta, esposizione a calore eccessivo a una temperatura di oltre 37,78 °C e danni dovuti ad acqua o a liquidi.

La riparazione o sostituzione del sistema, come previsto dalla presente garanzia, è l'unica ed esclusiva azione correttiva offerta all'acquirente. MedRx non sarà responsabile di eventuali danni consequenziali o incidentali o della violazione di una qualsiasi garanzia esplicita o implicita. Salvo quanto previsto dalla legge vigente, qualsiasi garanzia implicita, di commerciabilità o idoneità a un dato scopo di questo prodotto è limitata alla durata della presente garanzia.

MedRx, a sua discrezione, fornirà assistenza e riparerà i prodotti fuori garanzia su richiesta dell'acquirente, addebitando le parti e la manodopera secondo necessità.

La garanzia limitata verrà invalidata in caso di installazione di software o hardware non approvati da MedRx, Inc. su questo prodotto. Il software approvato comprende i moduli di programmazione per l'adattamento degli apparecchi acustici approvati da Noah e dai produttori di apparecchi acustici HIMSA.

MedRx international non è responsabile per problemi derivanti dall'installazione di software o hardware non approvati. In presenza un conflitto causato da software o hardware non approvato e installato sul sistema, MedRx fornirà assistenza a un costo definito al momento dell'intervento.